NISHIKA

へばりついたクリームタイプ義歯安定剤が

スッキリとれる

口腔にも



義歯にも



液に触れると粘着力が無くなり
楽にはがせて**除去時間**が**短縮!!**



使い切りパウチタイプもあります



クリームタイプ義歯安定剤除去液

グリップオフ




口腔化粧品 販売名：Nリキッド／製造販売元：日本歯科薬品株式会社

除去の様子を
動画でご覧ください

特設サイト

NISHIKA 日本歯科薬品株式会社
本　　社 山口県下関市竹崎町4−7−24 〒750−0025 TEL 083−222−2221(代) FAX083−222−2220
大阪営業所 大阪市中央区道修町2−6−6 〒541−0045 TEL 06−6222−4090(代) FAX06−6222−3950
東京営業所 東京都台東区柳橋1−23−4 〒111−0052 TEL 03−5822−5350(代) FAX03−5822−5351
九州出張所 山口県下関市竹崎町4−7−24 〒750−0025 TEL 083−222−2221(代) FAX083−222−2220
お問い合わせ・資料請求は お客様窓口 0120−8020−96［ホームページ］https://www.nishika.co.jp/

「グリップオフ」は口腔や義歯にへばりついたクリームタイプ義歯安定剤がスッキリとれ、除去時間が短縮できる義歯安定剤除去液です。

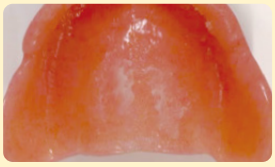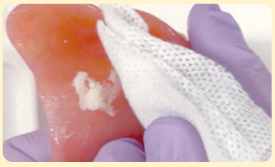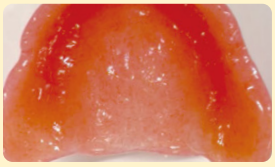
	除去前 クリームタイプ義歯安定剤がへばりついている	除去中 義歯安定剤の端からはがす	除去後
口腔			
義歯			

●使用方法


1
指に付属の
専用ガーゼを巻く



2
グリップオフをトレーに出し
指に巻いたガーゼにたっぷり
染み込ませる

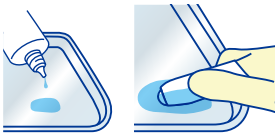


3
義歯安定剤を端から
めくり上げるようにはがす

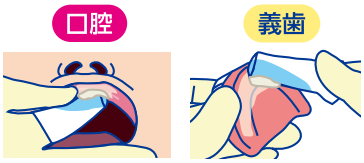

※義歯安定剤が乾いて固くなっている場合は、除去できないことがあります。その場合は、乾いて固くなっている部位を水で濡らした後に本剤を使用して除去してください。

4
ガーゼのきれいな面を出して
2~3を繰り返す

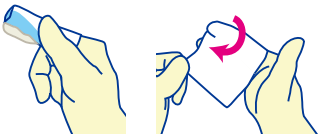

使い方(動画)は
こちらから

- 使用後は、口腔内または義歯を水で洗ってください。
- 液量が少ないと十分な除去効果が得られない場合があります。
- 細かな隙間などガーゼでは取り切れない場合は、義歯ブラシ等をご使用ください。
- ガーゼ1枚で口腔および義歯にお使いいただけます。

●包装／標準価格



【ボトル】
ボトル50mL、不織布ガーゼ 20枚
／3,000円



【パウチ】
使い切りパウチ4mL×18包、不織布ガーゼ20枚
／4,500円



別売

【グリップオフ用不織布ガーゼ】
不織布ガーゼ 20枚
／1,500円

【成分】基剤:水、PEG-8、PEG-4/可溶剤:PPG-4セテス-20/安定剤:塩化Ca/甘味剤:サッカリンNa、スクラロース/保存剤:安息香酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン/着香剤:香料(グレープタイプ)

●販売店名

サンプルの申込は
こちらから

1医療機関様につき
1回(パウチ1包)限り

NISHIKA Nippon Shika Yakuhin Co., Ltd.